




**How to activate
your Software Licence**

Before first time use: Activating your SmarTracks Diagnostics licence

1. Contact Humotion via support@humotion.net and provide your full name and email address.
2. You will receive your licence key per email.
NOTE: This may take up to two working days.
3. Download the SmarTracks Diagnostics software.
You can download the software on:
<http://download.humotion.net/SmarTracksDiagnostics/>
Username: **STSDS.download**
Password: **STSDS**
4. Open the SmarTracks Diagnostics software to activate your licence.
5. Click the SmarTracks logo in the upper left corner, and click "About...".
6. Go to the "Licence" tab and click "Activate".
7. Enter the email address and licence key provided and press "Activate".

You are now ready to go!

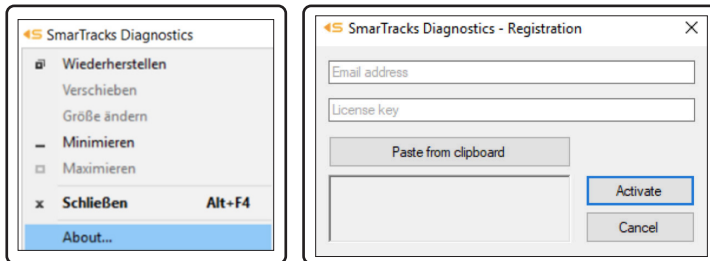

DE Vor der ersten Benutzung: Aktivieren Ihrer SmarTracks Diagnostics-Lizenz

1. Kontaktieren Sie Humotion über support@humotion.net und geben Sie Ihren vollständigen Namen und Ihre E-Mail-Adresse an.
2. Sie erhalten Ihren Lizenzschlüssel per E-Mail.
HINWEIS: Dies kann bis zu zwei Arbeitstage dauern.
3. Laden Sie die SmarTracks Diagnostics-Software herunter.
Sie können die Software herunterladen unter:
<http://download.humotion.net/SmarTracksDiagnostics/>
Benutzername: **STSDS.download**
Kennwort: **STSDS**
4. Öffnen Sie die SmarTracks Diagnosesoftware, um Ihre Lizenz zu aktivieren.
5. Klicken Sie auf das SmarTracks Logo in der linken oberen Ecke und klicken Sie auf „About...“.
6. Gehen Sie zur Registerkarte „Lizenz“ und klicken Sie auf „Aktivieren“.
7. Geben Sie die angegebene E-Mail-Adresse und den Lizenzschlüssel ein und drücken Sie „Aktivieren“.

Sie sind jetzt bereit!

FR Avant la première utilisation : Activation de votre licence SmarTracks Diagnostics

1. Contactez Humotion via support@humotion.net et indiquez votre nom complet et votre adresse électronique.
2. Vous recevrez votre clé de licence par e-mail.
NOTE : Cela peut prendre jusqu'à deux jours ouvrables.
3. Téléchargez le logiciel SmarTracks Diagnostics.
Vous pouvez télécharger le logiciel à l'adresse suivante :
<http://download.humotion.net/SmarTracksDiagnostics/>
Nom d'utilisateur : **STSDS.download**
Mot de passe : **STSDS**
4. Ouvrez le logiciel SmarTracks Diagnostics pour activer votre licence.
5. Cliquez sur le logo SmarTracks dans le coin supérieur gauche, et cliquez sur „À propos de...“.
6. Allez dans l'onglet „Licence“ et cliquez sur „Activer“.
7. Saisissez l'adresse électronique et la clé de licence fournies et appuyez sur „Activer“.

Vous êtes maintenant opérationnel !